



División Equipamientos Médicos



 **fisio relax**



**EQUIPO
TERAPÉUTICO**



División Equipamientos Médicos

LAS INDICACIONES FISIOTERAPEUTICAS EN LAS ILUSTRACIONES SIGUIENTES SON EL RESULTADO DE CUIDADOSOS ESTUDIOS MÉDICOS A APLICADOS EN TODO EL MUNDO

SEÑOR CLIENTE

Por consultas y/o reclamos respecto a su Garantía de compra, comunicarse por email a:

 **serviciotecnico@simesrl.com**



FUE VISITADO POR

Nombre y Apellido del Asesor:

Telefono del Asesor: +54 (_ _) _ _ _ _ _

MANUAL DIGITAL



Escanear el Código QR

Instrucciones de Uso

- **Botón interruptor 1:** Al presionar el botón por primera vez el equipo terapéutico se enciende, al presionar nuevamente se apaga.
- **Botón de Modo de Terapia 2:** Alpulsar el botón comenzarán las terapias y podrás cambiar de masaje e intensidad dentro de los 8 (ocho) programas disponible por el equipo.
- **Botón de Modo Calor 3:** Al presionar el botón se encenderá el modo temperatura (40°). Al presionar nuevamente se apagará el modo calor.



División Equipamientos Médicos

Tratamientos Deportivos



Fatiga muscular producido por la sobre ejercitación deportiva en pectorales y zona superior de brazos

Seciones: 15 min.
Frecuencia Máx.: 1 a 3 veces al día



Dolores musculares en lumbares (Cintura),y dorsales, ciático por la exigencia deportiva o cualquier otra causa

Seciones: 15 min.
Frecuencia Máx.: 1 a 3 veces al día



Mio relajación de aductores y gemelos. Aumento de drenaje linfático. Calambres y dolor muscular producidos por sobre exigencias deportivas.

Seciones: 15 min.
Frecuencia Máx.: 1 a 3 veces al día



Hernias discales, nervio ciático, dolores de cadera, mala circulación, artrosis de cadera, lumbalgias.

Seciones: 15 min.
Frecuencia Máx.: 1 a 3 veces al día



Mio relajación de aductores y gemelos. Aumento de drenaje linfático. Calambres y dolor muscular producidos por sobre exigencias deportivas.

Seciones: 15 min.
Frecuencia Máx.: 1 a 3 veces al día



División Equipamientos Médicos

Estimado/a Cliente


Al adquirir este producto, usted a demostrado ser una persona comprometida con su calidad de vida, la cual se encuentra relacionada con la prevención y nuestras reservas de energías orgánicas.

Las energía impulsa a que se logre el doble de resultados con el mismo esfuerzo, lo cual asociamos a una existencia mas vital y mas plena.

Siguiendo ese concepto **SIMED** desarrolla un proyecto importante:

“Calidad de Vida”

**PREVENCIÓN
RELAJACIÓN
BUEN DESPERTAR
CALIDAD DE VIDA**

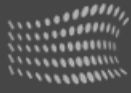

fisio relax

TRATAMIENTOS FISIOTERAPÉUTICOS

Espalda y Cuello



fatigas diarias debido a malas posturas prolongadas, sobre exigencias y stress muscular. Dolores de cadera, ciático, hernia de discos lumbalgias.

Seciones: 15 min.
Frecuencia Máx.: 1 a 3 veces al día



Insomnio, fatiga nerviosa, stress, dolor de cuello, zumbidos en los oídos.

Se consigue un descanso reparador de las energías orgánicas.

Seciones: 10 min.
Frecuencia Máx.: 1 a 3 veces al día



División Equipamientos Médicos

Quinesia Respiratoria



Asma, bronquitis, facilita la expectoración y eliminación de mucosidades aliviando la fatiga respiratoria.

Quinesia respiratoria electrónica niños y adultos.

Seciones: 5 a 10 min.
Frecuencia Máx.: 2 veces al día



Sinusitis: Alivia la congestión y se obtiene una rápida remoción de la presión frontal.

Quinesia Respiratoria Niños y Adultos

Seciones: 8 a 10 min.
Frecuencia Máx.: 2 veces al día

Piernas / Reflexología en Pies




Pies fríos, cansados, hinchados, doloridos por permanecer mucho tiempo de pie, uso calzados incorrectos. Deficiente o circulación sanguínea deficiente o cualquier otra causa

Seciones: 10 a 15 min.
Frecuencia Máx.: Cuando sea necesario.



Várices (Reabsorción de edemas) acompañado por dolor, calambres, cansancios y dolores musculares.

Rehabilitación-
Seciones: 10 a 15 min.
Frecuencia Máx.: Cuando sea necesario

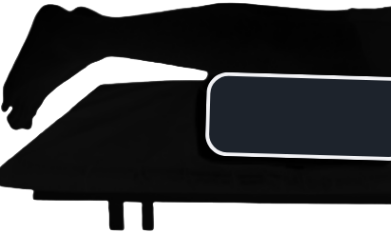

Reumatismo (artrosis - artritis) en las rodillas, meniscos en fase de rehabilitación. Luxación. Acumulación de ácido úrico. Inflamación común de articulaciones y dolor.

Seciones: 10 a 15 min.
Frecuencia Máx.: Cuando sea necesario



División Equipamientos Médicos